

NÁVOD BAŇKOVÝ PŘÍSTROJ



Pečlivě si přečtete návod, než začnete přístroj používat.

01/BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

01. Pokud jsou vaše nabíječi kabely nebo zástrčky poškozené, nikdy je neskládejte sami. Kontaktujte dodavatele a požádejte o opravu.
 02. Odpojte zařízení, když dokončíte masáž.
 03. Odpojte zařízení, když ho jdete čistit.
 04. Nikdy nepoužívejte nedoporučené příslušenství.
 05. Přestaňte používat zařízení, pokud se cítíte nepohodlně.
 06. Nelijte vodu ani žádnou jinou tekutinu na nebo do zařízení.
 07. Nepoužívejte zařízení násilně.
 08. Před použitím zařízení prosím vložte bavlněný filtr do filtru. Filtr může zabránit masáži z vnitřku zařízení. Dlouhá životnost zařízení může být výrazně udržována.
 09. Opláchněte bavlněný filtr, abyste ho mohli znovu použít.
 10. Pacienti s vavry by neměli zařízení používat.
 11. Nepoužívejte zařízení během menstruace nebo těhotenství.
 12. Poradte se s lékařem, pokud máte hypoglykémii nebo hypertenzi.
 13. Nikdy nepoužívejte zařízení po jídle. Doporučujeme si odpočinout přibližně 30-45 minut.
 14. Také si odpočíte přibližně 30-45 minut před sprchováním.
 15. Třete na jedné straně, abyste dosáhli gua sha. Nepoužívejte kruhovou masáž.
 16. Aby zůstalo vaše tělo zdravé, neťete každý den. Doporučujeme si odpočinout po provedení gua sha.
 17. Nepoužívejte zařízení, když je vaše tělo mokré.
 18. Tento produkt nelze považovat za lék nebo lékařský přístroj.

01/BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PROSTŘEDÍ

01. Neužívejte zařízení v extrémně horkém nebo vlhkém prostředí.
 02. Produkt nesmí být používán při řízení nebo chůzi.
 03. Skládajte své zařízení v původní krabici, když není použito, je důležité uchovávat jej na bezpečném a suchém místě, daleko od prachu a koroziívných látek. Přestaňte zařízení používat, pokud cítíte nepohodu.


VAROVÁNÍ PŘI GUA SHA

- Není dovoleno škárat v obličejích a na krku.
- Nepokrčujte ve škárách na stejné oblasti.

POZOR PŘI GUA SHA


- Škrábání gua sha pomáhá zrychlit metabolismus. Po provedení gua sha vypijte dvě sklenice vody a poté si odpočíte více než hodinu.
- Gua sha otevře póry vašeho těla, proto buďte opatrní na vítr po provedení gua sha.
- Doporučuje se odpočinout 3-10 hodin před sprchováním (teplá sprcha je ideální).
- Po provedení gua sha je důležité adekvátní odpočinout.
- Připomenutí: Pokud máte nějaké onemocnění, prosím nejprve se poradte s lékařem.

FUNKCE FILTRU A FILTRAČNÍ BAVLVY:

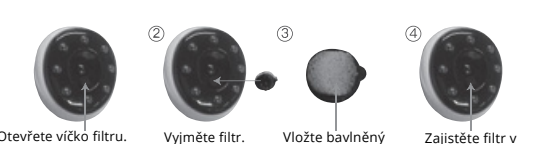

02/VLASTNOSTI PRODUKTU

- Zařízení je přenosné.
- Vnější vzhled má ergonomický design.
- Integruje více funkcí do jednoho jednoduchého zařízení.
- Magnetické kamery a červené světlo vyvažují zdraví člověka a výrazně zvyšují váš metabolismus a prokrvení.

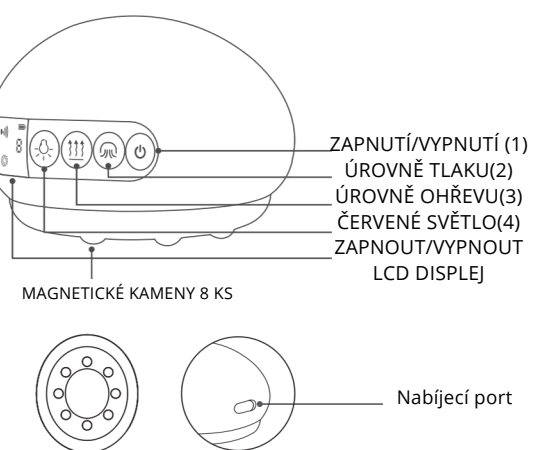

03/ JAK POUŽÍVÁT

- Dlouhým stisknutím (1) zapnete zařízení. Výchozí režim je „červené světlo“ zapnuté.
- Dlouhým stisknutím (1) zařízení vypnete.
- Krátkým stisknutím (2) přepnete úroveň.
- Dlouhým stisknutím vypnete (2) tuto funkci.
- Krátkým stisknutím (3) přepnete teplotu. (úroveň 0, úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3, 0-Circle) Dlouhým stisknutím (3), vypnete tuto funkci.
- Krátkým stisknutím (4) zapnete nebo vypnete červené světlo.
 - Výchozí režim: červené světlo
 - Režim tlaku: úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3, úroveň 4, úroveň 5
 - Režim ohřevu: úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3
- Nízký ohřev: 38 ± 3 °C
- Střední ohřev: 41 ± 3 °C
- Vysoký ohřev: 44 ± 3 °C
- Když je zařízení v nabíjení, přestane fungovat.
- Nepoužívejte zařízení, když se nabíjí.

04/ NÁVOD NA GUA SHA A TŘENÍ

- Záda: Třete záda nahoru a dolů.
- Noha: Masírujte chodidlo od prsty.
- Břicho: Třete břicho nahoru a dolů. V této oblasti je povoleno také kruhové masírování.
- Horní končetiny: Třete nahoru a dolů.
- Nohy: Třete nahoru a dolů.
- Připomenutí: Masáž jedním směrem může dosáhnout lepších efektů.

05/ JAK NABÍJET

- Prosím, ihned nabijte zařízení, pokud má nízkou baterii.
- Pokud je napětí nižší než 3,3 V, ikona baterie bude neustále blikat. Jakmile je napětí baterie nižší než 3,35 V, zařízení se automaticky vypne.
- Zapněte DC napájení, abyste začali nabíjet. Ikona baterie zobrazí aktuální stav nabíjení. Pokud se zobrazí 3 čárky, výkon je <33 %. Pokud je >33 % a <66 %, zobrazí se 1 čárka. Pokud je >66 %, ikona baterie zobrazí 2 čárky. Pokud je plně nabitá, zobrazí se 3 čárky.

06/ ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

DENNÍ ČISTĚNÍ

- Vypněte zařízení, když ho jdete čistit.
- Použijte měkký, suchý hadřík k čištění zařízení. Pokud je velmi špinavé, prosím, vyčistěte ho ubrousky s 75% alkoholem.
- Nalijte vodu nebo koroziivní látku dovnitř nebo na zařízení.

JAK SKLADOVAT

- Zařízení není určeno pro použití nikým se sníženými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, včetně dětí. Udržujte zařízení mimo dosah výše uvedených osob.
- I když zařízení nepoužíváte, důrazně se doporučuje nabíjet zařízení každé dva měsíce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Produkt se nezapíná - Nabijte produkt.

Produkt se nenabíjí - Zástrčka nebyla správně zasunuta. Znovu připojte zástrčku.

07/PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu	Baňkový přístroj
Model č.	uCute-2500A
Jmenovité napětí	3.7V
Jmenovitý výkon	4.4 W
Pracovní proud	≤ 1.5A
Pohotovostní proud po vypnutí	< 20uA
Automatické časování	10 min
Hlučnost	< 65dB


Elektryczna bańka do masażu uCute Instrukcja



ACUS MED

Instrukcja obsługi elektrycznej bańki chińskiej z funkcją podgrzewania

1. Opis urządzenia

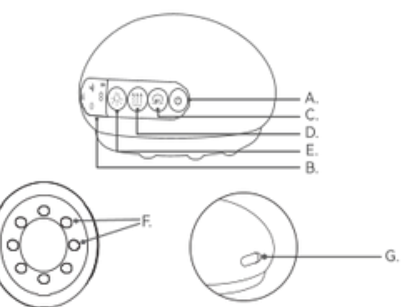

A. włącznik / wyłącznik
 B. wyświetlacz LCD
 C. przycisk do regulacji poziomu ciśnienia
 D. przycisk do regulacji poziomu temperatury
 E. przycisk włączający / wyłączający światło czerwone
 F. kamienie magnetyczne (8 szt.)
 G. port ładowania USB

2.Cechy i zastosowanie

Elektryczna bańka chińska z funkcją podgrzewania posiada wygodny i ergonomiczny kształt, który zapewnia dopasowanie do dłoni i ułatwia wykonanie masażu. Bańka posiada 8 kamieni magnetycznych, regulację temperatury oraz poziomu ciśnienia, a możliwość ładowania za pomocą kabla USB pozwala na korzystanie z bańki w dowolnym miejscu.

Elektryczna bańka chińska o właściwościach leczniczych i kosmetycznych znajduje swoje zastosowanie m.in. podczas masażu antycellulitowego. Dzięki wykorzystaniu światła czerwonego, regulacji ciepła i intensywności można dostosować masaż do indywidualnych potrzeb.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Osoby, u których występują żyłki nie powinny korzystać z masażu bańką chińską.
- Nie zaleca się korzystania z bańki chińskiej w ciąży oraz w czasie menstruacji.
- Osoby cierpiące na nadciśnienie lub hipergruknięcie przed użyciem bańki powinny skontaktować się z lekarzem.
- Nie powinno się korzystać z masażu elektryczną bańką po posiłku, a przerwa powinna wynosić ok. 30-40 minut.
- Nie zaleca się kąpiei ani prysznicu tuż po masażu - należy odczekać ok. 3 godziny.
- Masażu nie powinno się wykonywać codziennie, a ok. 3 lub 4 razy w tygodniu.
- Przed każdym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wewnętrzny znajduje się bawełniany filtr zapobiegający przedostaniu się oleju do wnętrza urządzenia.
- Przed każdym użyciem bańki należy natłoczyć spora ilość oleju do masażu, jednak w przypadku osób ze skórą wrażliwą, przed pierwszym użyciem należy zrobić test na alergię aplikując olejek np. na nadgarstku.
- Masażu należy wykonywać w jednym kierunku i nie powinno się masować zbyt długo jednego miejsca na ciele.
- Z bańki chińskiej nie należy korzystać podczas ładowania.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania.
- Przed każdym użyciem bańki należy umyć bawełniany filtr.

13. W przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki nie należy ich demontować samodzielnie, a zgłosić usterkę do serwisu.
 14. Podczas czyszczenia urządzenia nie należy stosować akcesoriów nie przeznaczonych do elektrycznej bańki chińskiej.
 15. Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą - podczas czyszczenia nie należy wlewać wody do wnętrza ani na jego powierzchnię.
 16. Gdy występuje dyskomfort podczas korzystania z urządzenia należy zakończyć masaż.
 17. Urządzenia nie powinno się stosować w pomieszczeniach, gdzie występuje gorące lub wilgotne powietrze.
 18. Z bańki chińskiej nie wolno korzystać podczas prowadzenia samochodu.
 19. Elektryczna bańka chińska powinna być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w bezpiecznym, suchym miejscu niewidocznym dla dzieci, z dala od złącz środków i kurzu.

4. Zalecenia przed i po użyciu urządzenia

- Elektrycznej bańki chińskiej nie powinno się używać na twarzy, szyi i klatce piersiowej.
- Nie powinno się wykonywać masażu w jednym miejscu na ciele, a wykonywać masaż partiami.
- Osoby, u których występują choroby i różnego rodzaju dolegliwości przed użyciem bańki powinny skontaktować się z lekarzem.
- Po masażu ciała bańką chińską zaleca się wypicie ok. dwóch szklanek wody oraz odpočinąć przez ok. godzinę.
- Ze względu na otwarcie porów podczas masażu należy unikać przeciagów i wiatru tuż po zabiegu.
- Po masażu należy pójść pod prysznic (najlepiej ciepły), ale dopiero po upływie ok. 3 godzin.
- Masażu nie należy wykonywać codziennie, a ok. 3 - 4 dni w tygodniu. Po seji należy zrobić przerwę (5 - 7 dni) i ponownie wrócić do kolejnych seji.

5. Jak korzystać z funkcji urządzenia?

- Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania do momentu, aż lampka zaświeci się na czerwono. W ten sam sposób należy wyłączać urządzenie - lampka zgśnie.
- Należy nacisnąć przycisk do regulacji poziomu ciśnienia (C) naciskając kolejno wybrać poziom (1 - 5). Na wyświetlaczu pojawi się ikona ciśnienia oraz pojawi się sygnał dźwiękowy. W celu wyłączenia funkcji ciśnienia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (C).
- W celu regulacji temperatury należy wybrać odpowiedni poziom (1 - 3) naciskając przycisk (D). W celu wyłączenia funkcji ogrzewania należy nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk (D).
- W celu włączenia i wyłączenia światła czerwonego należy nacisnąć przycisk (E).
- Podczas ładowania nie ma możliwości korzystania z urządzenia.
 - Tryb domyślny: świecą się czerwone lampki
 - Tryb ciśnieniowy: poziom 1, 2, 3, 4, 5
 - Tryb ogrzewania: poziom 1, 2, 3
 - Niskie ogrzewanie: 38°C/3°C/100.4°F±5.4°F
 - Średnie ogrzewanie: 41°C/3°C/105.8°F±5.4°F
 - Wysokie ogrzewanie: 44°C/3°C/111.2°F±5.4°F

6. Jak wykonywać masaż ciała elektryczną bańką chińską?

Zawsze przed użyciem elektrycznej bańki chińskiej należy zaaplikować na skórę spora ilość oleju do masażu, który zapewni odpowiedni poziom urządzenia po skórze. Masaż należy wykonywać zawsze w jednym kierunku - od dołu do góry.


- masaż grzbietu - od dołu do góry;
- podnieś nogi - od przodu do boków;
- brzuch - ruchy okrężne lub od dołu do góry;
- ramiona - ruchy od dołu ku górze;
- masaż nóg - należy rozpocząć od masażu łokciem; kieniąc: ruchy od dołu ku górze;
- naprawdę przechodząc do ud i pośladków.

7.Sposób ładowania urządzenia

- Urządzenie zostało wyposażone w baterię litowo-jonową. Na wyświetlaczu pojawia się ikona poziomu ładowania baterii, gdy wskazuje niski poziom, należy podłączyć urządzenie do ładowania.
- W celu podłączenia urządzenia do ładowania należy podłączyć kabel USB do przełącznika, a następnie do gniazda zasilania, bądź bezpośrednio do portu USB komputera.
- Na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczny status ładowania. Podczas ładowania nie można jednocześnie korzystać z urządzenia.

8. Sposób czyszczenia i konserwacji urządzenia

- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Podczas czyszczenia należy sprawdzić si miękką, wilgotną ściereczką, a w przypadku mocniejszych zabrudzeń warto wspomóc się niewielką ilością środka do dezynfekcji o stężeniu 75%.
- W czasie czyszczenia oraz konserwacji należy pamiętać, aby nie zamoczyć urządzenia ani nie dopuścić do przedostania się płynów i środków czyszczących do wnętrza - mogłyby doprowadzić do zwarcia już podczas wykonywania masażu.
- Podczas czyszczenia należy pamiętać także o wypukłaniu bawełnianego filtra lub wymianie na nowy (patrz rysunek poniżej).



9. Sposób przechowywania

Elektryczną bańkę chińską należy przechowywać najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od wysokiej temperatury, wilgoci i promieni słonecznych. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je odłączyć od zasilania oraz ładować raz na około 2 miesiące.

10. Instrukcja utylizacji

Bateria litowa - jonowa do elektrycznej bańki chińskiej to specjalny akumulator i nie może być używany w innych urządzeniach. Należy przestrzegać zasad opisanych poniżej, w innym wypadku mogą doprowadzić do przegrzania, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

- Urządzenie należy trzymać z dala od ognia.
- Nie wolno demontować części z urządzenia ani przekształcać go.
- Nie wolno ładować dodatkowej ujemnej elektrody z metalem.
- Urządzenia nie powinno się przechowywać z blizutem itp.
- Nie powinno się używać ani ładować urządzenia w pobliżu ognia, kominka, pieca, kuchenki lub pod słonecznik.

11. Dane techniczne

Nazwa produktu	Elektryczna bańka chińska
Model	uCute
Napięcie znamionowe	3.7V
Moc znamionowa	4.4w
Prąd czuwaniowy po wyłączeniu	<20uA
Hałas	<65dB
Niskie ogrzewanie	38°C±3°C/100.4°F±5.4°F
Średnie ogrzewanie	41°C±3°C/105.8°F±5.4°F
Wysokie ogrzewanie	44°C±3°C/111.2°F±5.4°F
Inteligentny czasomierz	10 min
Pojemność akumulatora	2200mAh

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Produkt nie włącza się.	Bateria jest rozładowana.	Naladuj produkt.
Bateria nie ładuje się.	Wtyczka nie została wpięta prawidłowo.	Produkt należy stosować po pełnym naładowaniu. Ponownie podłącz wtyczkę.

Your paragraph text

ACUS MED Sp. z o.o.
 Kolbuszowa Dolna ul. Mielecka 105
 36-100 Kolbuszowa
 POLSKA
 +48 570 266 112
 info@acusmed.pl

ACUS MED Sp. z o.o. ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa, Polska
MD **CE** **MADE IN P.R.C.**